

Incubator Care

العناية بالحضانة (الإنكوباتور)

مذكرة للمراجعة والمذاكرة | Study Notes

1. Definition & Indications

١. التعريف ودواعي الاستخدام

Incubator

An apparatus for maintaining an infant, especially a premature infant, in an environment of **controlled temperature, humidity and oxygen concentration**.

الحضانة (Incubator)

جهاز يحافظ على الرضيع، خاصة المولود المبتر (الخديج)، في بيئة مضبوطة الحرارة والرطوبة وتركيز الأكسجين.



A neonate inside an incubator
مولود داخل الحضانة

Indications

دواعي الاستخدام

#	English	العربية
1	Observation of very sick neonates.	مراقبة المواليد شديدي المرض.
2	When they are at risk of abnormal heat loss.	عندما يكونون معرضين لفقد غير طبيعي للحرارة.
3	Provision of the desired humidity and oxygenation.	توفير الرطوبة والأكسجين المطلوبين.


#	English	العربية
4	Isolation from infections, or when they already have a known infection.	العزل من العدوى، أو عندما يكون عندهم عدوى معروفة.

2. Principles of Incubator Care

٢. أسس العناية بالحضانة

#	English	العربية
1	A cleaning schedule should be prepared and applied.	يجب إعداد جدول للتنظيف وتطبيقه.
2	Cleaning is preferably done in a dedicated place .	يُفضّل أن يتم التنظيف في مكان مخصص.
3	The inside and outside surfaces of the incubator are cleaned daily .	تُنظّف الأسطح الداخلية والخارجية للحضانة يوميًا.
4	Incubators are disinfected between each baby .	تُطهّر الحضانة بين كل طفل والآخر.
5	Rinse and dry using disposable paper towels .	اشطف وجفّف بمناديل ورقية تُستخدم مرة واحدة.
6	Disinfect all parts using chlorine (200–500 ppm) .	طهّر كل الأجزاء بالكلور (200–500 جزء في المليون).
7	Aerate the incubator before re-use.	هوّ الحضانة قبل إعادة استخدامها.

#	English	العربية
8	Do not use adhesive tape to stick the baby's information label.	لا تستخدم شريطاً لاصقاً لتثبيت بطاقة بيانات الطفل.
9	Store clean incubators properly.	احفظ الحضانات النظيفة بشكل صحيح.
10	Change the incubator cover every 7 days , or any time it is soiled or moist.	غير غطاء الحضانة كل 7 أيام، أو في أي وقت يتسخ أو يبتل.
11	Limit opening the large door – it interferes with the air temperature.	قلّل فتح الباب الكبير لأنه يؤثر على درجة حرارة الهواء.
12	Replace the incubator every 7 days for full-term infants and every 5 days for preterm infants. Document the replacement date clearly on the unit.	استبدل الحضانة كل 7 أيام للمواليد كاملي النمو وكل 5 أيام للمبتسرين، وسجّل تاريخ الاستبدال بوضوح على الجهاز.

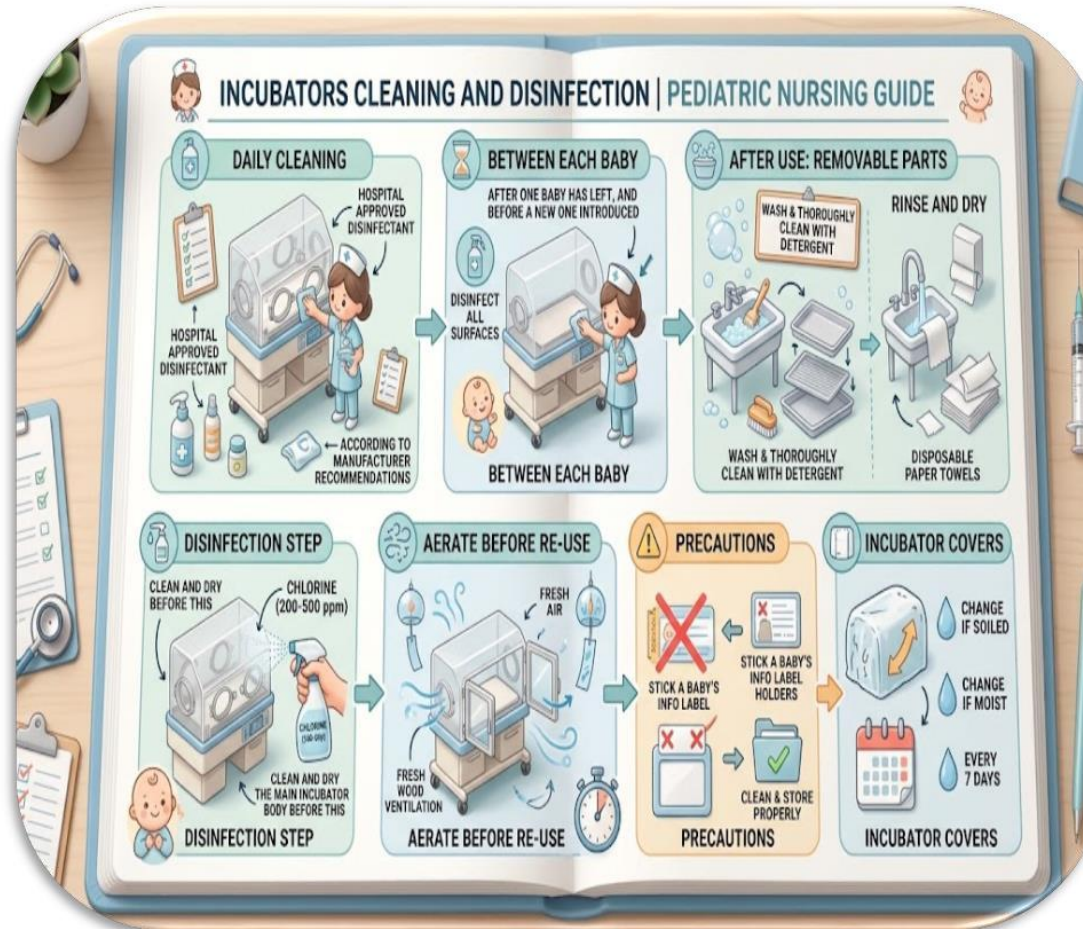

Incubator cleaning and disinfection guide

دليل تنظيف وتطهير الحضانة

3. Equipment

٣. الأدوات

#	English	العربية
1	Distilled water.	ماء مقطر.
2	Antiseptic solution (e.g., diluted hypochlorite solution).	محلول مطهر (مثل محلول هيبوكلوريت مخفف).
3	Tray.	صينية.
4	Towel.	فوطه (منشفة).
5	Disposable gloves.	جوانتي يُستخدم مرة واحدة.

4. Procedure

٤. خطوات الإجراء

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
1	Wash hands. اغسل يديك.	To avoid cross infection. لتجنب نقل العدوى.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
2	Prepare the necessary equipment. جهّز الأدوات اللازمة.	—
3	Provide privacy throughout the procedure. وقّر الخصوصية طوال الإجراء.	—
4	Keep the environment clean and safe. حافظ على بيئة نظيفة وآمنة.	—
5	Wear gloves. ارتدِ الجوانتي.	To act as a protective physical barrier. ليكون حاجزًا واقياً.
6	Verify the expiry date and operating parameters of the disinfectants before use. تأكد من تاريخ الصلاحية وشروط استخدام المطهرات قبل الاستعمال.	Ineffective disinfectants could make cleaning/sterilization fail. المطهرات غير الفعالة قد تُفشّل التنظيف والتعقيم.
7	Remove the neonate from the incubator if his condition permits . أخرج المولود من الحضانة إذا سمحت حالته.	To clean safely while keeping the baby warm and avoiding rapid heat loss. للتنظيف بأمان مع إبقاء الطفل دافئًا ومنع فقد الحرارة السريع.
8	Wet a sterile towel/sponge with distilled water . بلّل فوطة/إسفنجة معقمة بالماء المقطّر.	—

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
9	Remove any unclean equipment and clean the inside of the incubator from far to near and from up to down, in one direction, from the cleanest to the dirtiest. أزل أي أدوات غير نظيفة ونظّف داخل الحضانة من البعيد للقريب ومن أعلى لأسفل في اتجاه واحد، من الأنظف إلى الأوسخ.	To follow aseptic cleaning principles. لاتتباع مبادئ التنظيف المعقم.
10	Dry the inside with a dry sterile towel, far to near and up to down in one direction. جفّف الداخل بفوطة معقمة جافة، من البعيد للقريب ومن أعلى لأسفل في اتجاه واحد.	To remove residual moisture completely. لإزالة الرطوبة المتبقية تمامًا.
11	Using an approved disinfectant, clean the outer walls every 8 hours , wiping top-to-bottom in a single direction. استخدم مطهرًا معتمدًا ونظّف الجدران الخارجية كل 8 ساعات بمسح من أعلى لأسفل في اتجاه واحد.	To reduce germs in the environment, prevent hospital-acquired infections and avoid re-contaminating cleaned areas. لتقليل الميكروبات في البيئة ومنع عدوى المستشفيات وتجنب إعادة تلويث الأماكن النظيفة.
12	Wipe the plastic cover of the mattress with disinfectant. امسح الغطاء البلاستيكي للمرتبة بالمطهر.	—

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
13	Change the bed sheet. غيّر ملاءة السرير.	—
14	Change the distilled water in the humidifier tank and fill it to the proper level with distilled water . غيّر الماء المقطّر في خزان الترطيب واملاه للمستوى المناسب بالماء المقطّر.	To prevent stagnation and microbial growth. لمنع ركود الماء ونمو الميكروبات.
15	Monitor oxygen flow rate and concentration as prescribed. راقب معدل تدفق الأكسجين وتركيزه حسب الأمر الطبي.	To ensure adequate tissue oxygenation and meet the neonate's metabolic needs. لضمان وصول الأكسجين الكافي للأنسجة وتلبية احتياجات المولود.
16	Set and monitor the humidity at 55–65% . اضبط وراقب الرطوبة بين 55 و65%.	To prevent dehydration, insensible water loss and temperature instability. لمنع الجفاف وفقد الماء غير المحسوس وعدم ثبات الحرارة.
17	Maintain the temperature between 32 °C and 36 °C . حافظ على الحرارة بين 32 و36 درجة مئوية.	To prevent thermal stress. لمنع الإجهاد الحراري.
18	Return the neonate into the incubator, ensuring his comfort and safety. أعد المولود إلى الحضانة مع التأكد من راحته وسلامته.	To provide a secure, controlled and thermally stable micro-environment. لتوفير بيئة صغيرة آمنة ومضبوطة وثابتة الحرارة.

#	Step الخطوة	Rationale (Why?) السبب
19	Return and clean the reused equipment. أعد الأدوات التي تُستخدم مرة أخرى ونظّفها.	—
20	Remove gloves. اخلع الجوانتي.	—
21	Wash hands. اغسل يديك.	—

5. Exam Cheat Sheet – Keywords

٥. ملخص الامتحان – الكلمات المفتاحية

If you see the word on the left in the exam, remember the answer on the right.

لو الكلمة دي جت في الامتحان، افكر الإجابة اللي قصاها.

Keyword الكلمة المفتاحية	Remember this افتكر ده
Incubator الحضانة	Controls temperature, humidity, oxygen for (premature) infants. تتحكم في الحرارة والرطوبة والأكسجين للمواليد (خاصة المبترسين).
Indications الدواعي	Very sick neonates; risk of heat loss; humidity & oxygen; isolation of infection. مواليد شديدي المرض؛ خطر فقد الحرارة؛ رطوبة وأكسجين؛ عزل العدوى.
Daily cleaning التنظيف اليومي	Inside and outside surfaces daily ; outer walls every 8 hours . الأسطح الداخلية والخارجية يوميًا؛ الجدران الخارجية كل 8 ساعات.
Disinfect التطهير	Between each baby ; chlorine 200–500 ppm . بين كل طفل؛ كلور 200–500 جزء في المليون.
Rinse / dry الشطف والتجفيف	Disposable paper towels. مناديل ورقية تُستخدم مرة واحدة.

Keyword الكلمة المفتاحية	Remember this افتكر ده
Before re-use قبل إعادة الاستخدام	Aerate the incubator. تهوية الحضانة.
Label بطاقة البيانات	No adhesive tape. ممنوع الشريط اللاصق.
Cover الغطاء	Change every 7 days or if soiled/moist. يُغيّر كل 7 أيام أو لو اتسخ/ابتل.
Replace incubator استبدال الحضانة	7 days full-term 5 days preterm; write the date on the unit. 7 أيام لكامل النمو 5 أيام للمبتسر؛ اكتب التاريخ على الجهاز.
Large door الباب الكبير	Limit opening (affects air temperature). قلّل فتحه (يؤثر على حرارة الهواء).
Equipment الأدوات	Distilled water, antiseptic (hypochlorite), tray, towel, disposable gloves. ماء مقطر، مطهر (هيبوكلوريت)، صينية، فوطة، جواناتي.
Cleaning direction اتجاه التنظيف	Far → near, up → down, one direction, cleanest → dirtiest. من البعيد للقريب، من أعلى لأسفل، اتجاه واحد، من الأنظف للأوسخ.
Outer walls الجدران الخارجية	Top-to-bottom, single direction, every 8 h. من أعلى لأسفل، اتجاه واحد، كل 8 ساعات.

Keyword الكلمة المفتاحية	Remember this افتكر ده
Humidity الرطوبة	55–65%; humidifier uses distilled water (change it to prevent stagnation). 55–65%؛ الخزان ماء مقطر (يُغيّر لمنع الركود).
Temperature الحرارة	32–36 °C (prevents thermal stress). 32–36 °C (لمنع الإجهاد الحراري).
Oxygen الأكسجين	Monitor flow rate and concentration as prescribed. راقب معدل التدفق والتركيز حسب الأمر الطبي.
Before starting قبل البدء	Wash hands, gloves, check disinfectant expiry date, remove baby if condition permits. اغسل يديك، الجوانتي، افحص صلاحية المطهر، أخرج الطفل إن سمحت حالته.
At the end في النهاية	Return baby (comfort & safety), clean reused equipment, remove gloves, wash hands. أعد الطفل (راحة وأمان)، نظّف الأدوات، اخلع الجوانتي، اغسل يديك.